

Usuwacz kamienia nazębnego


Instrukcja obsługi

Model : YJK-015A



Dziękujemy za skorzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami przed użyciem, ściśle przestrzeganie zaleceń oraz odpowiednie przechowywanie urządzenia.

Wygląd i kolor produktu. Prosimy odwołać się do rzeczywistego produktu.

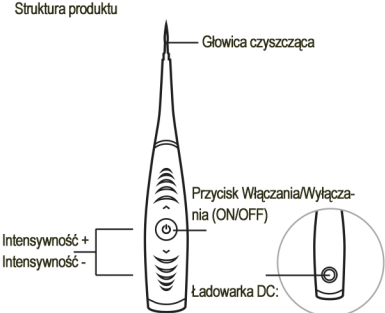

Ten produkt jest niewielki i wygodny w przenoszeniu, co umożliwia łatwe czyszczenie zębów w domu. Urządzenie wykorzystuje głowicę czyszczącą o strukturze podobnej do narzędzi stosowanych przez dentystów. Jest skuteczne w usuwaniu widocznego kamienia nazębnego oraz ma pewien efekt czyszczący w przypadku płytki nazębnej i przebarwień na zębach.

Cechy produktu:

- > Profesjonalna głowica czyszcząca ze stopu metalu, efekt czyszczenia bardzo ładny;
- > Pięć regulowanych, odpowiednich do różnych potrzeb;
- > Inteligentne vibracje o wysokiej częstotliwości, skuteczne usuwanie kamienia nazębnego itp.;
- > Konstrukcja całego ciała, piękna i hojna;
- > Bateria jest trwała i praktyczna

Uwaga:


- > Metalowa głowica szczoteczki do zębów, niewymienna
- > Nie wystawiaj produktów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Umieszczaj w pomieszczeniu w temperaturze od -10 C do 40 C
- > Nie myj ani nie mocz produktu przez długi czas
- > Produkty są przeznaczone wyłącznie dla osób dorosłych. Po użyciu przechowuj je prawidłowo, unikaj kontaktu z dziećmi, aby dzieci nie zostały przez pomyłkę zranione.
- > Produkt zawiera baterie. Nie umieszczaj produktów w ogniu ani w pojemniku o wysokiej temperaturze, aby uniknąć pożaru lub wybuchu

Specyfikacja produktu:

Napięcie znamionowe: 3,7 V	Prąd znamionowy: 200mA
Pojemność baterii: 200mAh	Prąd czuwania: <20uA
Rozmiar produktu: 193,6X30X22,3mm	Waga produktu: 48g
Napięcie ładowania: 5V	Hałas silnika: <60dB

Metoda użycia:


Pierwsze użycie, ładowanie będzie trwało ponad 2 godziny, aż do całkowitego rozładowania, patrz opis ładowania.

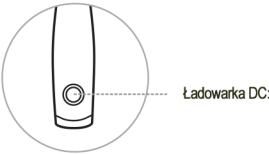

Rys. 1

Naciśnij przycisk rozruchowy, aby włączyć, wyreguluj pozycję klucza za pomocą górnych i dolnych przycisków regulacji i rozpocznij czyszczenie części, które wymagają czyszczenia. (Rys. 2)

Po wyczyszczeniu zębów umyj metalową głowicę bieżącą, czystą wodą. Wyczyść dział, aby wytrzeć korpus środka czyszczącego zęby.

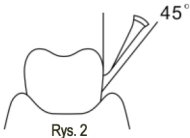

Rys. 2

Ładowarka

- Tryb ładowania: Produkt używa trybu ładowania za pomocą interfejsu DC. Użytkownik powinien wyciągnąć dostarczony kabel z interfejsem DC, włożyć interfejs DC do gniazda na tylnej stronie urządzenia, a interfejs USB podłączyć do końca ładowarki.
- Stan urządzenia podczas ładowania: Po rozpoczęciu ładowania, urządzenie do czyszczenia zębów przechodzi w stan zamknięty (off). W tym czasie urządzenie przestaje działać.
- Wskaźnik ładowania: Podczas ładowania, dolne światło jest czerwone. Po naładowaniu do pełna, światło zmienia kolor na zielony. (Pic3)



Rys. 3

Certyfikat Kwalifikacji

Model: _____ P/N: _____

LOT: _____ Data wysyłki: _____

Data sprawdzenia: _____ Kohrtroler: _____

Karta gwarancyjna

Imię i Nazwisko: _____

Data zakupu: _____

Nr telefonu: _____

Adres: _____

Powód zwrotu: _____
